

# FICHA TÉCNICA - INTRAFIX® SAFESET E INTRAFIX® PRIMELINE

FAMÍLIA DE EQUIPOS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E MEDICAÇÕES

## CATEGORIA DO PRODUTO:

Equipo

## CÓDIGOS DE REFERÊNCIA:

401411P - INTRAFIX PRIMELINE AIR LUER  
401413P - INTRAFIX PRIMELINE AIR IL SLIP  
401450P - INTRAFIX PRIMELINE AIR IL  
401450S - INTRAFIX SAFESET AIR IL  
401455P - INTRAFIX PRIMELINE AIR 2 IL  
401455S - INTRAFIX SAFESET AIR 2 IL  
401460P - INTRAFIX PRIMELINE AIR  
401460S - INTRAFIX SAFESET AIR

## INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:

Tratam-se de equipos para infusão por gravidade, indicados para administração de soluções parenterais e medicações, acondicionadas em frascos de vidro ou ampolas plásticas.

Ressalte-se que os produtos que compõem a família não são indicados para administração de soluções parenterais e medicações fotossensíveis.

## CONTRAINDICAÇÕES:

Não aplicável

## PRECAUÇÕES:

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo.
- Não é permitida sua reesterilização sob nenhuma hipótese.
- Conservar em local seco e arejado de forma a manter sua integridade.

## ADVERTÊNCIAS

- Antes de utilizar o produto, verificar o prazo de validade. Não utilizar se o prazo de validade estiver vencido.
- Os equipos são fornecidos estéreis e, portanto, se as embalagens estiverem danificadas, rasgadas ou perfuradas, devem ser consideradas não estéreis e os produtos descartados.

## ACESSÓRIOS:

Não aplicável



## DIMENSÕES:

Comprimento do tubo: 150 cm

## MATÉRIAS PRIMAS:

PE, PSU, PVC, ABS, Blenda (SB / SBS + TPE), TPE, PS, PC, PP, PE, PMMA, SB + TPE, NYLON 15µ, Papel Hidrófobo

## CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

Os Equipos para Infusão Gravitacional de Soluções Parenterais e Medicações são armazenados em sua embalagem original.

Armazená-los a temperatura ambiente, em local fresco e seco, ao abrigo de luz solar direta, poeira e umidade.

Transportar o produto com os cuidados necessários de forma a manter sua integridade.

Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer tipo de contaminação.

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

**Embalagem Primária:** Embalagem primária (unitária): filme + papel grau cirúrgico

**Embalagem Secundária:** Embalagem secundária: caixas contendo 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, e 140 unidades para cada uma das apresentações.

## ESTERILIZAÇÃO:

Esterilizado por Óxido de Etileno

VALIDADE:


3 anos

NÃO CONTÊM LÁTEX

LIVRE DE DEHP


FIGURA DO PRODUTO COM INDICAÇÃO E LEGENDA DOS COMPONENTES:

### Intrafix Safeset AIR

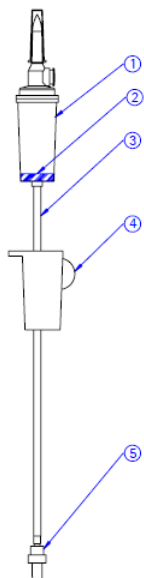


ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Câmara Gotejadora
2.	Filtro de Fluido
3.	Tubo PVC
4.	Regulador de Fluxo (Pinça Rolete)
5.	Conector Luer

### Intrafix Safeset AIR IL

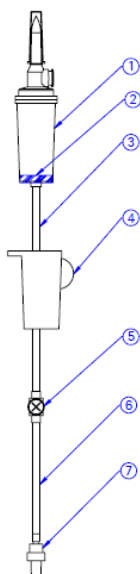


ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Câmara Gotejadora
2.	Filtro de Fluido
3.	Tubo PVC
4.	Regulador de Fluxo (Pinça Rolete)
5.	Tubo PVC
6.	Injetor Lateral
7.	Tubo PVC
8.	Conector Luer

### Intrafix Safeset AIR 2 IL

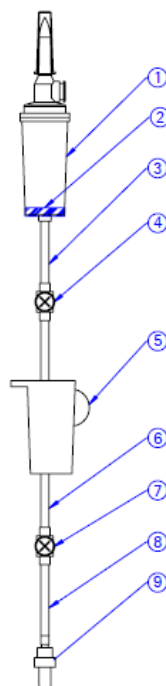

ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Câmara Gotejadora
2.	Filtro de Fluido
3.	Tubo PVC
4.	Injetor Lateral
5.	Regulador de Fluxo (Pinça Rolete)
6.	Tubo PVC
7.	Injetor Lateral
8.	Tubo PVC
9.	Conector Luer


### Intrafix Primeline AIR

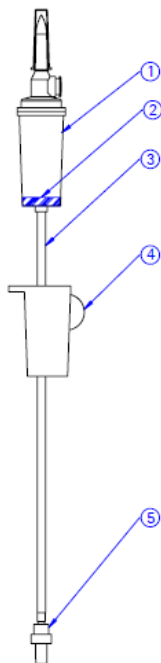

ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Câmara Gotejadora
2.	Filtro de Fluido
3.	Tubo PVC
4.	Regulador de Fluxo (Pinça Rolete)
5.	Conector Luer


ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Câmara Gotejadora
2.	Filtro de fluido
3.	Tubo PVC
4.	Regulador de Fluxo (Pinça Rolete)
5.	Tubo PVC
6.	Injetor Lateral
7.	Tubo PVC
8.	Conector Luer

### Intrafix Primeline AIR 2 IL

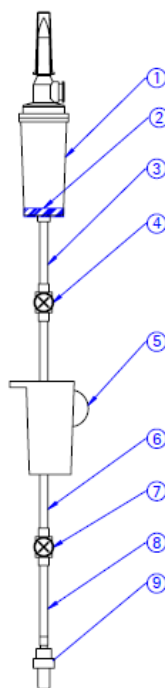


ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Câmara Gotejadora
2.	Filtro de Fluido
3.	Tubo PVC
4.	Injetor Lateral
5.	Regulador de Fluxo (Pinça Rolete)
6.	Tubo PVC
7.	Injetor Lateral
8.	Tubo PVC
9.	Conector Luer

### Intrafix Primeline AIR IL

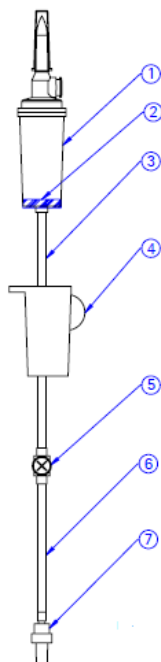


## Intrafix Primeline AIR IL Slip

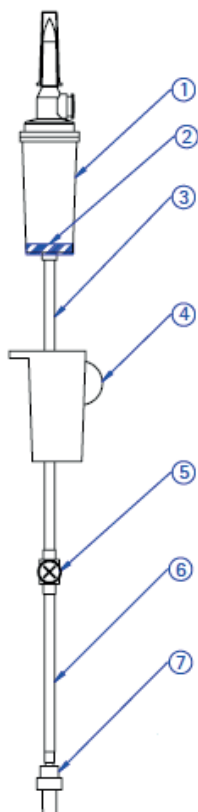

ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Câmara Gotejadora
2.	Filtro de Fluido
3.	Tubo PVC
4.	Regulador de Fluxo (Pinça Rolete)
5.	Injetor Lateral
6.	Tubo PVC
7.	Conector Luer

## Intrafix Primeline AIR Luer

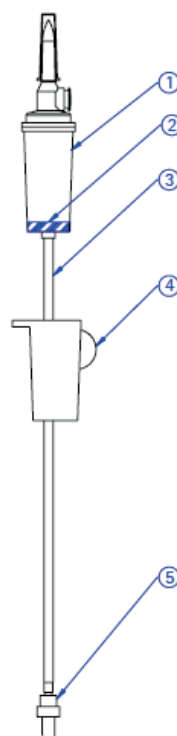

ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Câmara flexível c/ entrada de ar ponta perfurante
2.	Filtro de fluido
3.	Tubo
4.	Regulador de Fluxo (Pinça Rolete)
5.	Conector Luer c/ protetor

Farm. Responsável: Rosane G. R. da Costa - CRF/RJ n.º.:  
3213

B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

Registro ANVISA n.º.: 80136990540

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

