

# FICHA TÉCNICA – DIACAN® SINGUCAN

## AGULHAS DE FÍSTULA

### CATEGORIA DO PRODUTO:

Agulhas de Fístula

### CÓDIGO DE REFERÊNCIA:

7023253 DIACAN 15G A 1,8X20X150 GAMMA  
7023254 DIACAN 15G A 1,8X20X300 GAMMA  
7023255 DIACAN 15G A 1,8X25X150 GAMMA  
7023256 DIACAN 15G A 1,8X25X300 GAMMA  
7023263 DIACAN 16G A 1,6X20X150 GAMMA  
7023264 DIACAN 16G A 1,6X20X300 GAMMA  
7023265 DIACAN 16G A 1,6X25X150 GAMMA  
7023266 DIACAN 16G A 1,6X25X300 GAMMA  
7023273 DIACAN 17G A 1,5X20X150 GAMMA  
7023275 DIACAN 17G A 1,5X25X150 GAMMA  
7023276 DIACAN 17G A 1,5X25X300 GAMMA  
7023353 DIACAN 15G V 1,8X20X150 GAMMA  
7023355 DIACAN 15G V 1,8X25X150 GAMMA  
7023356 DIACAN 15G V 1,8X25X300 GAMMA  
7023363 DIACAN 16G V 1,6X20X150 GAMMA  
7023364 DIACAN 16G V 1,6X20X300 GAMMA  
7023365 DIACAN 16G V 1,6X25X150 GAMMA  
7023366 DIACAN 16G V 1,6X25X300 GAMMA  
7023373 DIACAN 17G V 1,5X20X150 GAMMA  
7023375 DIACAN 17G V 1,5X25X150 GAMMA  
7023376 DIACAN 17G V 1,5X25X300 GAMM  
7023453 DIACAN S 15G A 1,8X20X150MM GAMMA  
7023454 DIACAN S 15G A 1,8X20X300MM GAMMA  
7023456 DIACAN S 15G A 1,8X25X300MM GAMMA  
7023463 DIACAN S 16G A 1,6X20X150MM GAMMA  
7023464 DIACAN S 16G A 1,6X20X300MM GAMMA  
7023465 DIACAN S 16G A 1,6X25X150MM GAMMA  
7023466 DIACAN S 16G A 1,6X25X300MM GAMMA  
7023475 DIACAN S 17G A 1,5X25X150MM GAMMA  
7023553 DIACAN S 15G V 1,8X20X150MM GAMMA  
7023554 DIACAN S 15G V 1,8X20X300MM GAMMA  
7023556 DIACAN S 15G V 1,8X25X300MM GAMMA  
7023563 DIACAN S 16G V 1,6X20X150MM GAMMA  
7023564 DIACAN S 16G V 1,6X20X300MM GAMMA  
7023565 DIACAN S 16G V 1,6X25X150MM GAMMA  
7023566 DIACAN S 16G V 1,6X25X300MM GAMMA  
7023655 DIACAN 15G A/V 1,8X25X150 GAMMA  
7023665 DIACAN 16G A/V 1,6X25X150 GAMMA  
7023684 DIACAN 18G A/V 1,3X20X300 GAMMA  
7023753 SINGUCAN 15G 1,8X20X150 GAMMA



7023755 SINGUCAN 15G 1,8X25X150 GAMMA  
7023763 SINGUCAN 16G 1,6X20X150 GAMMA  
7023765 SINGUCAN 16G 1,6X25X150 GAMMA  
7023773 SINGUCAN 17G 1,5X20X150 GAMMA

### COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

Vide figura do produto com Indicação e Legenda dos componentes.

### DESCRIPTIVO TÉCNICO:

A agulha de fístula Diacan® S é um dispositivo de acesso vascular descartável para utilização em terapêuticas extracorporais, comprimento da agulha 25 mm, comprimento do tubo 300 mm, vem equipada com abas codificadas por cores correspondendo ao diâmetro da agulha: Azul 15 G (1,8mm), Verde 16 G (1,6mm), Vermelho 17 G (1,5mm) e dispositivo de segurança.

### Diacan®

Embalagens individuais ou com duas agulhas (Twin-Set). Comprimento da agulha 25 mm, comprimento do tubo 300 mm. Abas codificadas por cores correspondendo ao diâmetro da agulha: Azul 15 G (1,8mm), Verde 16 G (1,6mm), Vermelho 17 G (1,5mm).

### INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:

Agulhas de Fístula para punção arterial (com back-eye) ou venosa (sem back-eye) no tratamento de hemodiálise ou outra forma de purificação sanguínea extracorpórea.

## CONTRAINDICAÇÕES; PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

- Não há nenhuma contra-indicação e/ou advertência relacionada ao uso destes dispositivos.
- Este produto não deve ser usado depois de expirada a data de validade;
- A data de validade só se aplica se o mesmo estiver com a sua embalagem íntegra;
- A esterilidade do produto só está garantida quando a embalagem não está danificada;
- Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar.
- Conservar em ambiente limpo e seco, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra;
- Armazenar em local seco, à temperatura entre 0°C e 30°C e protegido da luz.
- Não usar o produto caso esteja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo;
- No momento da retirada do produto de sua embalagem primária, para utilização, devem ser tomadas todas as medidas de precaução de a se evitar danos no produto e ferimento acidental com a agulha.
- Os conectores luer lok® fêmea da agulha de fistula Diacan® cumprem com as normas internacionais ISO 594 e EN 1707. Os sistemas de ligação à linha de sangue adequados à norma mencionada têm de ser utilizados em conformidade. O fabricante não assume qualquer responsabilidade sob qualquer utilização de linhas de sangue com características ou disposição incompatíveis.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

### Diacan®

Preciso perfil de corte bi-facetado, causam mínimos traumas ao acesso vascular, paredes extremamente finas e siliconizadas garantem um fluxo laminar constante, reduzem a coagulação e propiciam melhores fluxos de sangue, asas giratórias e função clip, Back-eye na agulha arterial.

### Diacan® S

Apresenta as mesmas características da Diacan® e mecanismo de segurança integrado. A agulha de fistula Diacan® S proporciona à equipe de enfermagem uma proteção efetiva contra acidentes e riscos de contaminação; o dispositivo de segurança é ativado tão logo a agulha é removida do paciente, durante o movimento.

## MATÉRIAS PRIMAS:

PE, PVC, PC, PP, PUR, LPDE, Aço inoxidável

## NÃO CONTÊM LÁTEX

## CONTÊM DEHP


## CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Armazenar em local seco, à temperatura entre 0°C e 30°C e protegido da luz.

- Transportar com os cuidados necessários para manter a integridade do produto.
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- No momento da retirada do produto de sua embalagem primária para utilização, devem ser tomadas todas as medidas de precaução a fim de se evitar danos no produto e ferimentos acidentais com a agulha.


## FIGURA DO PRODUTO COM INDICAÇÃO E LEGENDA DOS COMPONENTES:

### Diacan® A

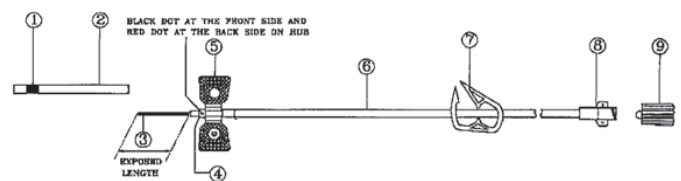


ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Filtro
2.	Protetor da Agulha
3.	Cânula (com back-eye)
4.	Hub da Asa
5.	Asa
6.	Tubo
7.	Clamp (Pinça)
8.	Conector Luer
9.	Tampa do Conector

### Diacan® V

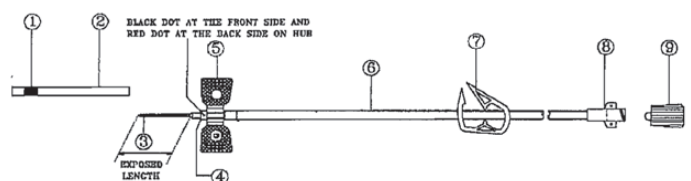

ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Filtro
2.	Protetor da Agulha
3.	Cânula (com back-eye)
4.	Hub da Asa
5.	Asa
6.	Tubo
7.	Clamp (Pinça)
8.	Conector Luer
9.	Tampa do Conector

**Diacan® Set (A/V)**

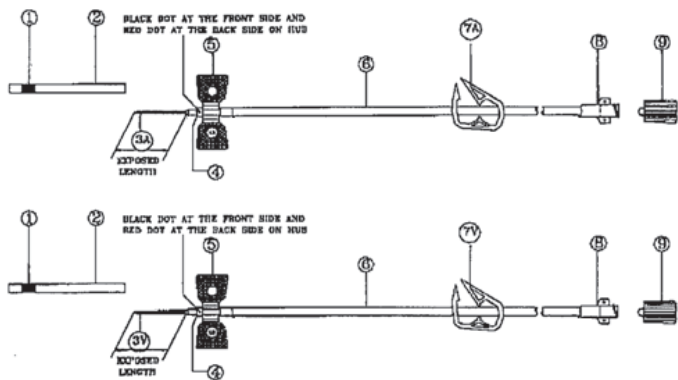

**ESTERILIZAÇÃO:**

Esterilizado por Raios Gama

**VALIDADE:**

5 anos.

**REPROCESSAMENTO PROIBIDO CONFORME RDC 156/06:**

Produto com reprocessamento proibido.

**Farm. Responsável: Rosane G. R. da Costa - CRF/RJ n°.: 3213**

ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Filtro
2.	Protetor da Agulha
3A.	Cânula (sem back-eye)
3B.	Cânula (com back-eye)
4.	Hub da Asa
5.	Asa
6.	Tubo
7A.	Clamp (Pinça) Vermelha
7V.	Clamp (Pinça) Azul
8.	Conector Luer
9.	Tampa do Conector

B. Braun Brasil  
 S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

Registro ANVISA nº 80136990697

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

