


INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

Monofilamento de poli-p-dioxanona, absorvível, violeta

(Nome Técnico: Fio de Sutura)

Descrição

MonoPlus® é uma sutura monofilamentosa sintética absorvível estéril produzida a partir de homopolímero poli-p-dioxanona. MonoPlus® é tingido de violeta com a cor DετC Violet nº 2 (cor Index nº 60725), aprovada pelo FDA para suturas monofilamentosas. MonoPlus® preenche todos os requisitos da Farmacopéia Européia e Americana para suturas monofilamentosas sintéticas absorvíveis, exceto para variações mínimas de diâmetro nas suturas.

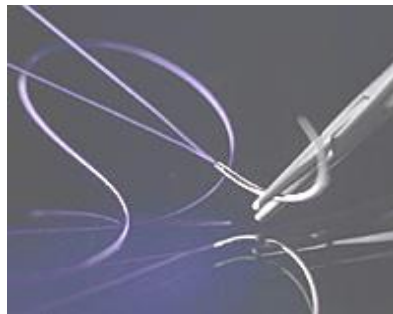**Indicações**

MonoPlus® está indicada na generalidade para aproximação dos tecidos moles, principalmente nos casos em que um suporte mais extenso da ferida , superior a 4 semanas , é desejável.

MonoPlus® pode também ser utilizada em cirurgia cardiovascular pediátrica.

Em cirurgia vascular, MonoPlus® está indicada para sutura de vasos periféricos autólogos.

Aplicações

O procedimento depende particularmente dos requisitos cirúrgicos. As suturas devem ser selecionadas dependendo da dimensão da ferida, da condição do paciente, da técnica de sutura e da experiência do cirurgião.

Modo de Utilização

Quando a sutura MonoPlus® é utilizada, há uma leve reação inflamatória, que é típica de uma reação típica endógena a um corpo estranho. MonoPlus® degrada-se no corpo por meio de

INSTRUÇÕES DE USO

SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL

hidrólise em ácido 2-hidroxietoxiacético, o qual posteriormente é absorvido e eliminado pelo corpo. Após a implantação, o processo hidrolítico conduz a um sucessivo decréscimo da força tênsil e por último a uma degradação massiva. 50 a 70% da força tênsil inicial do nó conforme o tamanho dos monofilamentos. A degradação completa do MonoPlus® fica completa após 180 a 210 dias.

Contra-Indicações

A utilização de MonoPlus® está contra-indicada para aproximações de tecidos sob tensão para sutura de implantes sintéticos tais como enxertos vasculares ou válvulas cardíacas.

Advertências

MonoPlus® não deve ser reesterilizado. Embalagens abertas não utilizadas ou danificadas devem ser destruídas. MonoPlus® não deve ser guardado à temperatura ambiente. Não se deve expor o MonoPlus® a temperaturas extremas por um longo período de tempo. Não utilizar o MonoPlus® depois de expirado o prazo.

O utilizador deve estar familiarizado com os procedimentos cirúrgicos quando utiliza o MonoPlus®. O utilizador deve ter em consideração que o risco de deiscência da ferida pode variar consoante a zona de aplicação e o tipo de material de sutura utilizado. Tal como com todos os outros materiais de sutura, o contato prolongado com soluções salinas, tais como urina e bÍlis, podem conduzir a litÍase.

Na utilização de MonoPlus® deve-se ter em atenção que em tecidos pouco vascularizados podem ocorrer um retardamento na absorção da sutura.

A utilização do MonoPlus® poderá não estar indicada no caso de pacientes que sofram de doenças ou que estejam em condições que possam retardar o processo de cicatrização da ferida. Como o MonoPlus® é um material de sutura absorvÍvel, o cirurgião deverá considerar a utilização de uma sutura não-absorvÍvel suplementar para fechar os locais que possam sofrer dilatação, alongamento ou distensão, ou que requeiram um suporte adicional.

Precauções

Os utilizadores devem estar familiarizados com as técnicas de sutura cirúrgicas de suturas monofilamentosas absorvÍveis antes de aplicar o MonoPlus®.

INSTRUÇÕES DE USO

SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL

Quando da utilização de material de sutura MonoPlus® deve-se ter o máximo de cuidado de forma a assegurar que os instrumentos cirúrgicos utilizados, tais como o fórceps ou porta-agulhas não causem nenhum dano ao material de sutura.

Em certas aplicações (ex. em ortopedia) pode ser necessária a imobilização por um suporte externo, além da utilização cirúrgica de MonoPlus®.

Efeitos Secundários

Tal como com outros materiais de sutura reabsorvíveis, a utilização do MonoPlus® pode causar uma irritação temporária no local da ferida e poderá ainda ocorrer uma reação inflamatória passageira ao corpo estranho. O endurecimento dos tecidos nem sempre poderá ser evitado durante a absorção de suturas subcutâneas e infecções já existentes poderão ser agravadas.

Esterilização

As suturas MonoPlus® são esterilizadas por óxido de etileno.

Condições de Armazenamento

Sob refrigeração na faixa de temperatura de 3° a 8 °C com a embalagem original fechada da forma recebida do fornecedor.

Apresentação Comercial

As suturas são embaladas em embalagem individual tipo bolsa de alumínio e acondicionadas em caixas de cartolina contendo 4, 12, 24 ou 36 unidades.

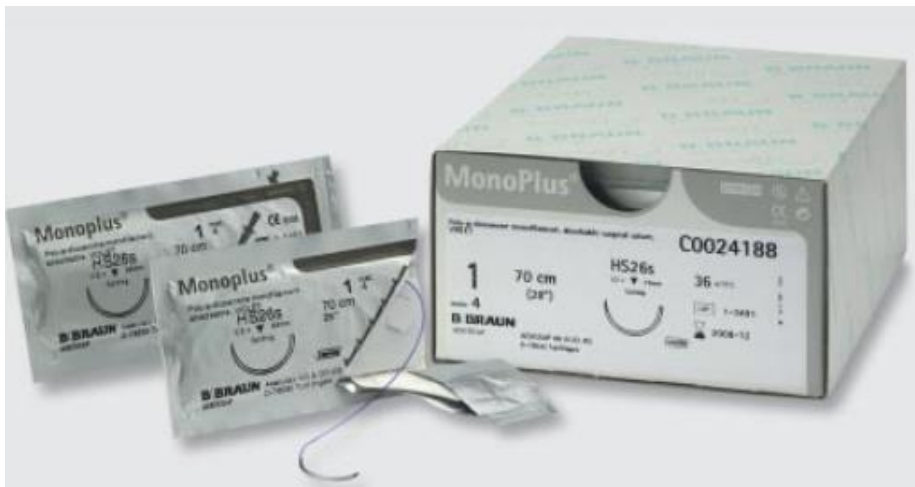
INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

Figura 1: Forma de apresentação de MonoPlus

- Embalagem de abertura direta**Códigos da Embalagem Direta:**

B0024091	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HR48 (M)LOOP
B0024096	MONOPLUS VIOLET 0(3.5)150CM FRT65(M)LOOP
B0024098	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HR76 (M)LOOP
B0024100	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 250CM HR65 (M)LOOP
B0024339	MONOPLUS VIOLET 1(4)120CM HR65 LOOP(M
B0024343	MONOPLUS VIOLET 1 (4)150CM HRT40S(M)LOOP
B0024347	MONOPLUS VIOLET 1 (4)150CM HRT43S(M)LOOP
B0024357	MONOPLUS VIOLET 0(3.5)150CM HRN50(M)LOOP
B0024358	MONOPLUS VIOLET 1(4) 150CM HRN50(M)LOOP
B0024391	MONOPLUS VIOLET 2(5) 150CM HRT48(M)LOOP
B0024392	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 200CM HRT48(M)LOOP
B0024393	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HRT48(M)LOOP
B0024395	MONOPLUS VIOLET 0(3.5)180CM HRT48(M)LOOP
B0024396	MONOPLUS VIOLET 1(4)180CM HRT48(M)LOOP
B0024397	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 180CM HR48 (M)LOOP
B0024568	MONOPLUS VI 6/0(0,7)4X70CM HR13 TO(M)DDP
B0024726	MONOPLUS VIOL 3/0(2)4X45CM HR22 TO(M)DDP
B0024765	MONOPLUS VI 3/0 (2) 4X45CM HR26 TO(M)DDP
C0024002	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HRN35(M)DDP
C0024003	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM HR22SS (M)DDP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C0024004	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)70CM HR22SS (M)DDP
C0024012	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DRT12(M)DDP
C0024013	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DRT12(M)DDP
C0024014	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM HS15 (M)DDP
C0024015	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HS37 (M)DDP
C0024024	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS37 (M) DDP
C0024025	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)70CM HR13SS (M)DDP
C0024026	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM DRC8 (M)DDP
C0024027	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC8 (M)DDP
C0024034	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR30 (M)DDP
C0024035	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)DDP
C0024036	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)DDP
C0024037	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 90CM HR17 (M)DDP
C0024038	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DR10 (M)DDP
C0024045	MONOPLUS VIOL 6/0(0,7)70CM 2XDRT12(M)DDP
C0024046	MONOPLUS VIOL 5/0 (1) 70CM 2XDRT12(M)DDP
C0024055	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)70CM 2XDRC18(M)DDP
C0024056	MONOPLUS VIOLET 1(4)90CM 2XHRT37S (M)DDP
C0024057	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 45CM HR17 (M)DDP
C0024058	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)90CM 2XFR26 (M)DDP
C0024062	MONOPLUS VI 0(3,5)150CM HS40S LOOP(M)DDP
C0024063	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR48 (M)DDP
C0024066	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S(M)DDP
C0024067	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 140CM DDP
C0024068	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 250CM ARO DDP
C0024077	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR13 (M)DDP
C0024078	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM HR17 (M)DDP
C0024079	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR30 (M)DDP
C0024085	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M)DDP
C0024086	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HR37S (M)DDP
C0024087	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HR37S (M)DDP
C0024088	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HR37S (M)DDP
C0024090	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M)DDP
C0024104	MONOPLUS VIO 0(3,5)150CM HR65 LOOP(M)DDP
C0024105	MONOPLUS VI 0(3,5)150CM FRT65 LOOP(M)DDP
C0024106	MONOPLUS VIOL 1(4)150CM HR76 LOOP (M)DDP
C0024108	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37 (M)DDP
C0024114	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37 (M)DDP
C0024115	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS37 (M) DDP
C0024116	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS23SS (M)DDP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C0024117	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M)DDP
C0024118	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37S(M)DDP
C0024119	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M) DDP
C0024121	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS40 (M)DDP
C0024122	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)90CM HS40S (M)DDP
C0024127	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS48 (M)DDP
C0024128	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR22 (M)DDP
C0024133	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HR22S (M)DDP
C0024134	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HS37S (M)DDP
C0024135	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HS37S (M)DDP
C0024136	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) DDP
C0024145	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC12(M)DDP
C0024146	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC18(M)DDP
C0024147	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT17(M)DDP
C0024156	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT30(M)DDP
C0024157	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT37(M)DDP
C0024158	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)90CM HRT37S(M)DDP
C0024168	MONOPLUS VIO 1(4)150CM HRT40S LOOP(M)DDP
C0024185	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HS26S (M)DDP
C0024186	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HS26S (M)DDP
C0024187	MONOPLUS VI 0(3,5)150CM HRT48 LOOP(M)DDP
C0024188	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)90CM HR43S (M)DDP
C0024189	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M) DDP
C0024202	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DR15 (M)DDP
C0024205	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DR15 (M)DDP
C0024206	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DR18 (M)DDP
C0024207	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)90CM HRT40S(M)DDP
C0024221	MONOPLUS VIOL 3/0 (2) 70CM 2XHR26 (M)DDP
C0024222	MONOPLUS VIOL 2/0 (3) 70CM 2XHR26 (M)DDP
C0024232	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM 2XHR37 (M)DDP
C0024233	MONOPLUS VIOL 7/0(0,5)70CM 2XDRC10(M)DDP
C0024243	MONOPLUS VI 4/0(1,5)4X70CM HR26 TO(M)DDP
C0024283	MONOPLUS VI 3/0 (2) 4X70CM HR26 TO(M)DDP
C0024284	MONOPLUS VI 2/0 (3) 4X70CM HR26 TO(M)DDP
C0024285	MONOPLUS VIOL 6/0(0,7)70CM 2XDRC12(M)DDP
C0024286	MONOPLUS VI 4/0(1,5)4X45CM HR22 TO(M)DDP
C0024294	MONOPLUS VIOL 3/0(2)4X45CM HR22 TO(M)DDP
C0024295	MONOPLUS VI 4/0(1,5)4X45CM HR26 TO(M)DDP
C0024305	MONOPLUS VI 3/0 (2) 4X45CM HR26 TO(M)DDP
C0024306	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDR10(MDDP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C0024307	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)70CM 2XDR12 (M)DDP
C0024311	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HRT37S (M)DDP
C0024316	MONOPLUS VIOL 5/0 (1) 70CM 2XDR15 (M)DDP
C0024321	MONOPLUS VIOL 3/0 (2) 70CM 2XDR15 (M)DDP
C0024322	MONOPLUS VIOL 5/0 (1) 70CM 2XDR18 (M)DDP
C0024323	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)70CM 2XDR18 (M)DDP
C0024332	MONOPLUS VI 2/0(3)150CM HS40S LOOP(M)DDP
C0024333	MONOPLUS VIOL 3/0 (2) 45CM 2XGR19 (M)DDP
C0024342	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)45CM 2XGS45 (M)DDP
C0024352	MONOPLUS VIOL 3/0 (2) 45CM 2XGS45 (M)DDP
C0024353	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRT43S (M)
C0024363	TENDO-LOOP MNP 5/0(1)30CM DS12 LOP(M)DDP
C0024373	TENDO-LOOP MNP 5/0(1)30CM DS16 LOP(M)DDP
C0024384	TENDO-LOOP MNP 4/0(1,5)30CM DS19LP(M)DDP
C0024394	MONOPLUS VIOLET 0(3.5)150CM HRT48(M)LOOP
C0024401	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM HR43S (M)
C0024402	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR43S (M)
C0024404	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM HRN35 (M)
C0024406	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRN45 (M)
C0024408	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRN50 (M)
C0024424	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 90CM HR17 (M)
C0024433	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 90CM HR26 (M)
C0024434	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 90CM HR26 (M)
C0024435	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M)
C0024436	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M)
C0024437	MONOPLUS VIOL. 4/0 (1.5) 90CM 2XHR26 (M)
C0024438	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M)
C0024439	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 90CM HR30 (M)
C0024440	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HR30 (M)
C0024441	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M)
C0024447	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM HR37 (M)
C0024448	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M)
C0024450	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37S (M)
C0024452	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM HR37S (M)
C0024453	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M)
C0024457	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM HR40 (M)
C0024458	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40 (M)
C0024467	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM HR40S (M)
C0024468	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)
C0024469	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M)

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C0024501	MONOPLUS VIOLET 7/0 (0.5) 70CM DR10 (M)
C0024512	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DR12 (M)
C0024513	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DR12 (M)
C0024517	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT37 (M)
C0024518	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRT37 (M)
C0024523	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DR15 (M)
C0024524	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DR15 (M)
C0024525	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DR15 (M)
C0024532	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DR18 (M)
C0024533	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DR18 (M)
C0024534	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DR18 (M)
C0024538	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM DS39 (M)
C0024545	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT40S (M)
C0024546	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRT40S (M)
C0024560	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 70CM HS40S (M)
C0024567	MONOPLUS VIOLET 0(3.5)150CM HR40S(M)LOOP
C0024602	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM 2XHR13(M)
C0024603	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR13 (M)
C0024604	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR13 (M)
C0024605	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHRT26 (M)
C0024613	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)
C0024614	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR17(M)
C0024624	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR26(M)
C0024625	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR26 (M)
C0024626	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR26 (M)
C0024634	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR22(M)
C0024635	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR22 (M)
C0024646	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR37 (M)
C0024721	MONOPLUS VIOLET 7/0 (0.5)70CM 2XDRC10(M)
C0024722	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7)70CM 2XDRC10(M)
C0024732	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7)70CM 2XDRC12(M)
C0024733	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XDRC12 (M)
C0024801	MONOPLUS VIOLET 7/0 (0.5) 70CM 2XDR10(M)
C0024802	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM 2XDR10(M)
C0024812	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM 2XDR12(M)
C0024813	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XDR12 (M)
C0024814	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XDR12(M)
C0024818	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HRT37S (M)
C0024823	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XDR15 (M)
C0024824	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XDR15(M)

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C0024825	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XDR15 (M)
C0024833	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XDR18 (M)
C0024834	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XDR18(M)
C0024835	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XFR26 (M)
C0024836	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XFR26 (M)
C0024895	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XGR65 (M)
C0024896	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XGR65 (M)
C0024897	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 70CM 2XGR65 (M)
C0024898	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM 2XGR65 (M)
C0024902	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 45CM HR13 (M)
C0024903	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 45CM HR13 (M)
C0024906	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS16 (M)
C0024907	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5)45CM DSMP19 (M)
C0024911	MONOPLUS VIOLET 7/0 (0.5) 45CM DR12 (M)
C0024928	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM JRC30S (M)
C0024936	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XFR26 (M)
C0024937	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM 2XFR26 (M)
C0024945	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR30 (M)
C0024966	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)150CM HS40S(M)LOOP
C0024976	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 45CM 2XDS39 (M)
C0024982	MONOPLUS VIOLET 6/0(0.7) 45CM 2XDR10(M)
C0024984	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 45CM 2XGR19(M)
C0024985	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM 2XGR19 (M)
C0024994	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 45CM 2XGS45(M)
C0024995	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM 2XGS45 (M)
C0024998	TENDO-LOOP MNP 4/0(1,5)30CM DRT18LP(MDDP
C0024999	TENDO-LOOP MNP 3/0(2)30CM DRT18 LP(M)DDP
G0024002	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR13 (M)
G0024025	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)
G0024026	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)
G0024114	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S (M)
G0024115	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM HS37S (M)
G0024116	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M)
G0024119	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M)
G0024134	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR22 (M)
G0024135	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)
G0024185	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)
G0024186	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M)
G0024187	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 70CM HS26S (M)
G0024343	MONOPLUS VIOLET 1 (4)150CM HRT40S(M)LOOP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

G0024358	MONOPLUS VIOLET 1(4) 150CM HRN50(M)LOOP
G0024391	MONOPLUS VIOLET 2(5) 150CM HRT48(M)LOOP
G0024393	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HRT48(M)LOOP
G0024568	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HR40S(M)LOOP
G0024812	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM 2XDR12(M)
X0024002	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR13 (M)
X0024003	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M)
X0024013	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
X0024014	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR17 (M)
X0024015	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
X0024024	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)
X0024025	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)
X0024026	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)
X0024027	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26 (M)
X0024035	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)
X0024036	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)
X0024037	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 70CM HR30 (M)
X0024045	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M)
X0024046	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M)
X0024058	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M)
X0024066	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M)
X0024067	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 70CM HR40S (M)
X0024068	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M)
X0024078	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)
X0024079	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M)
X0024085	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M)
X0024087	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26S (M)
X0024088	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)
X0024091	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HR48 (M)LOOP
X0024118	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS40 (M)
X0024128	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS48 (M)
X0024134	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR22 (M)
X0024135	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)
X0024136	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M)
X0024146	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22S (M)
X0024185	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)
X0024186	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M)
X0024187	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 70CM HS26S (M)
X0024188	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS26S (M)
X0024206	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR13SS (M)

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

X0024207	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 70CM HR13SS (M)
X0024232	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DRC12 (M)
X0024283	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HRT17 (M)
X0024284	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HRT17 (M)
X0024285	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT17 (M)
X0024294	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HRT22 (M)
X0024295	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT22 (M)
X0024305	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT26 (M)
X0024306	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT26 (M)
X0024342	MONOPLUS VIOLET 0(3.5)150CM HRT40S(M)LOOP
X0024347	MONOPLUS VIOLET 1 (4)150CM HRT43S(M)LOOP
X0024363	TENDO-LOOP MNP 5/0(1)30CM DS12 LOP(M)DDP
X0024373	TENDO-LOOP MNP 5/0(1)30CM DS16 LOP(M)DDP
X0024384	TENDO-LOOP MNP 4/0(1,5)30CM DS19LP(M)DDP
X0024392	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 200CM HRT48(M)LOOP
X0024393	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HRT48(M)LOOP
X0024402	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR43S (M)
X0024447	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM HR37 (M)
X0024452	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 90CM HR37S (M)
X0024453	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M)
X0024458	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40 (M)
X0024468	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)
X0024469	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M)
X0024512	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DR12 (M)
X0024513	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DR12 (M)
X0024518	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRT37 (M)
X0024533	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DR18 (M)
X0024534	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DR18 (M)
X0024567	MONOPLUS VIOLET 0(3.5)150CM HR40S(M)LOOP
X0024568	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HR40S(M)LOOP
X0024602	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM 2XHR13(M)
X0024603	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR13 (M)
X0024605	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHRT26 (M)
X0024613	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)
X0024614	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR17(M)
X0024634	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR22(M)
X0024635	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR22 (M)
X0024722	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7)70CM 2XDRC10(M)
X0024733	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XDRC12 (M)
X0024801	MONOPLUS VIOLET 7/0 (0.5) 70CM 2XDR10(M)

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

X0024812	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0.7) 70CM 2XDR12(M)
X0024813	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XDR12 (M)
X0024824	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XDR15(M)
X0024835	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XFR26 (M)
X0024836	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XFR26 (M)
X0024895	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XGR65 (M)
X0024896	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XGR65 (M)
X0024897	MONOPLUS VIOLET 0 (3.5) 70CM 2XGR65 (M)
X0024984	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 45CM 2XGR19(M)

- Embalagem RCP

O sistema de embalagem RacePack® (RCP) consiste principalmente em duas partes, uma bolsa externa e um apoio interno.

A embalagem externa é uma bolsa de alumínio composta por uma folha de alumínio de baixo e uma folha de cobertura. Esta bolsa serve como uma barreira contra agentes microbianos e agentes externos.

O componente interno é um suporte de enrolamento para a sutura. O suporte de enrolamento pode ser de dois diferentes tipos de acordo com o tamanho da agulha:

- Suporte de plástico: Composto por três partes, uma cobertura (tampa) e duas peças poliméricas (PP e PE).
- Suporte de papelão: Apenas uma peça com um pequeno pedaço de espuma para fixação de agulha pequena quando for necessário.

Modelos com embalagem RCP:

B2024079	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) .RCP
B2024089	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150CM HR48 (M).RCP
B2024090	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HR48 LOOPM.RCP
B2024091	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR48 LOOPM.RCP
B2024094	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HR65 LOOPM.RCP
B2024096	MONOPLUS VIO 0(3,5)150CMFRC65LOOP(M).RCP
B2024098	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR76 LOOPM.RCP
B2024099	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR76(M).RCP
B2024100	MONOPLUS VIOLET 1(4)250CM HR65 LOOPM.RCP
B2024107	MONOPLUS VIOLET 1(4)240CM HR65 LOOPM.RCP
B2024113	MONOPLUS VIOLET 1(4)240CM HR40SLOOPM.RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

B2024119	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) .RCP
B2024130	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR65 LOOPM.RCP
B2024235	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)90CM HRB65 (M).RCP
B2024339	MONOPLUS VIOLET 1(4)120CM HR65 LOOPM.RCP
B2024342	MONOPLUS VI 0(3,5)150CMHRC40SLOOP(M).RCP
B2024343	MONOPLUS VIOLET 1(4)150 HRC40S LOP(M.RCP
B2024347	MONOPLUS VIO 1(4)150CM HRC43SLOOP(M).RCP
B2024354	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CMHRC43SS(M).RCP
B2024357	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HRN50 LOPM.RCP
B2024358	MONOPLUS VIOLET 1(4)150 HRN50 LOOPM).RCP
B2024390	MONOPLUS VIOLET1(4)150CMFRC65LOOP(M).RCP
B2024391	MONOPLUS VIOLET2(5)150CMHRC48LOOP(M).RCP
B2024392	MONOPLUS VIOLET 1(4)200CM HRC48 LOPM.RCP
B2024393	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HRC48 LOPM.RCP
B2024394	MONOPLUS VIOLT 0(3,5)150CM HRC48LOPM.RCP
B2024396	MONOPLUS VIOLET1(4)180CMHRC48LOOP(M).RCP
B2024397	MONOPLUS VIOLET 1(4)180CM HR48 LOOPM.RCP
B2024398	MONOPLUS VIOLET 1(4)240CM HR48 LOOPM.RCP
B2024408	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRN50 (M).RCP
B2024416	MONOPLUS VIOLET 0(3.5)140CM HRN65(M).RCP
B2024469	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M).RCP
B2024500	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 140CM HR65 (M).RCP
B2024563	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150CM HR40S(M).RCP
B2024564	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HR40S(M).RCP
B2024567	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HR40S LOPM.RCP
B2024568	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR40S LOPM.RCP
B2024739	MONOPLUS VIOLET 1(4)150 HRC40S LOP(M.RCP
B2024790	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150CMHRB48LOPM.RCP
B2024858	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR70 (M) .RCP
B2024878	MONOPLUS VIOLET 1(4)150 HRB48 LOP(M).RCP
B2024895	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XGR65(M).RCP
B2024896	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM 2XGR65(M).RCP
B2024897	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)70CM 2XGR65(M).RCP
B2024898	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM 2XGR65(M).RCP
B2024987	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM GS60 (M).RCP
C2024002	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM HR13(M).RCP
C2024003	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13(M).RCP
C2024004	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR13(M).RCP
C2024005	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM 2XHR6M).RCP
C2024008	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM DR13B(M) .RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C2024010	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM DR10BM).RCP
C2024011	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM2XHRC17M.RCP
C2024012	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM HR17(M).RCP
C2024013	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17(M).RCP
C2024014	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR17(M).RCP
C2024015	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17(M).RCP
C2024017	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26S(M)RCP
C2024018	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS26S(M)RCP
C2024019	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HS26S(M)RCP
C2024021	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)120CM HS26S(M)RCP
C2024022	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)120CM HS37S(M)RCP
C2024023	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)120CM HS26S(M)RCP
C2024024	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR26 (M)RCP
C2024025	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)RCP
C2024026	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)RCP
C2024027	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M)RCP
C2024028	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)120CM HS26S(M)RCP
C2024031	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 120CM HS37S(M) RCP
C2024034	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR30 (M)RCP
C2024035	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)RCP
C2024036	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)RCP
C2024037	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M)RCP
C2024038	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M)RCP
C2024040	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR40 (M)RCP
C2024045	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M)RCP
C2024046	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M)RCP
C2024050	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRN30(M)RCP
C2024055	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HR37S (M)RCP
C2024056	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HR37S (M)RCP
C2024057	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HR37S (M)RCP
C2024058	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M) RCP
C2024063	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR48 (M)RCP
C2024066	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S(M)RCP
C2024067	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S(M)RCP
C2024068	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) RCP
C2024077	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M)RCP
C2024078	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)RCP
C2024080	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M) RCP
C2024081	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 45CM DS19 (M)RCP
C2024085	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HR26S (M)RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C2024086	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HR26S (M)RCP
C2024087	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S(M)RCP
C2024088	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)RCP
C2024092	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM FR26(M).RCP
C2024101	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM DS24 (M)RCP
C2024102	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM DS19 (M)RCP
C2024103	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)45CM DSMP24(M)RCP
C2024104	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37 (M)RCP
C2024105	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37 (M)RCP
C2024106	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS37 (M) RCP
C2024108	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS23SS (M)RCP
C2024109	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)45CM DSMP19(M)RCP
C2024110	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM FR26S (M).RCP
C2024111	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM FR26 (M) .RCP
C2024112	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)45CM DSMP24(M)RCP
C2024114	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M)RCP
C2024115	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37S(M)RCP
C2024116	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M) RCP
C2024117	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS40 (M)RCP
C2024118	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS40 (M)RCP
C2024121	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)90CM HS40S (M)RCP
C2024122	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)90CM HS40S (M)RCP
C2024126	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM JR36SS(M).RCP
C2024127	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS48 (M)RCP
C2024128	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS48 (M)RCP
C2024129	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HR17S(M).RCP
C2024131	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HR17S(M).RCP
C2024132	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HR17S(M).RCP
C2024133	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR22 (M)RCP
C2024134	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR22 (M)RCP
C2024135	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)RCP
C2024136	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M)RCP
C2024143	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)90CM HR26S (M)RCP
C2024145	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HR22S (M)RCP
C2024146	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HR22S (M)RCP
C2024147	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HR22S (M)RCP
C2024151	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM DSMP19(M)RCP
C2024155	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM HR10(M).RCP
C2024156	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HS37S (M)RCP
C2024157	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HS37S (M)RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C2024158	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) RCP
C2024162	MONOPLUS 6/0 (0,7) 70CM HR13B (M).RCP
C2024163	MONOPLUS 5/0 (1) 70CM HR13B (M).RCP
C2024164	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM2XHR22S(M).RCP
C2024165	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 30CM SKR22(M)RCP
C2024168	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)70CM JRC30S(M).RCP
C2024169	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)120CM JR30S(M).RCP
C2024170	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)120CM JR30S(M).RCP
C2024171	MONOPLUS VIOL 0(3,5)45CM 2XJRC30S(M).RCP
C2024175	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DS19 (M)RCP
C2024176	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)45CM DSMP11M.RCP
C2024177	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)45CM DSMP11(M).RCP
C2024179	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HS15(M).RCP
C2024180	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HS23 (M)RCP
C2024184	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HS30 (M)RCP
C2024185	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HS26S (M)RCP
C2024186	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HS26S (M)RCP
C2024187	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HS26S (M)RCP
C2024188	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS26S (M) RCP
C2024189	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM GS60(M).RCP
C2024190	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HS23 (M)RCP
C2024193	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DS12(M).RCP
C2024194	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)45CM DSMP16(M).RCP
C2024195	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HS30 (M)RCP
C2024199	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)30CM 2XHR26(M).RCP
C2024202	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS48 (M) RCP
C2024205	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM HR13SS(M).RCP
C2024206	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM HR13SS(M).RCP
C2024207	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)70CM HR13SS(M).RCP
C2024213	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70 2XDRC8(M).RCP
C2024221	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM DRC10M).RCP
C2024222	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC10M).RCP
C2024224	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDR13BM).RCP
C2024232	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC12M).RCP
C2024233	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC12M).RCP
C2024238	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR22M.RCP
C2024239	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR22(M).RCP
C2024240	MONOPLUS VIOLT 4/0(1,5)40CM GR19LOPM.RCP
C2024241	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)40CM GR19 LOPM.RCP
C2024243	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)70CM DRC18(M).RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C2024245	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)30CM GR19(M) .RCP
C2024247	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)30CM GR19(M).RCP
C2024250	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)35CM GR19(M).RCP
C2024253	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)120CM GR19(M).RCP
C2024254	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)120CM GR19(M).RCP
C2024261	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRC48 (M) RCP
C2024264	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HR26SS(M)RCP
C2024282	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)70CM HRC13(M).RCP
C2024283	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CMHRC17(M).RCP
C2024284	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CMHRC17(M).RCP
C2024285	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CMHRC17(M).RCP
C2024286	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CMHRC17(M).RCP
C2024294	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HRC22(M)RCP
C2024295	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC22(M)RCP
C2024304	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HRC26(M)RCP
C2024305	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC26(M)RCP
C2024306	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26(M)RCP
C2024307	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC26(M)RCP
C2024311	MONOPLUS VIOLET 2/0(3) 70CM HRC30S(M)RCP
C2024316	MONOPLUS VIOLET 2/0(3) 70CM HRC37S(M)RCP
C2024321	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)90CM HRC37SS(M)RCP
C2024322	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)90CM HRC37SS(M)RCP
C2024323	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRC37SS(M)RCP
C2024332	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC48(M)RCP
C2024333	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRC48 (M) RCP
C2024352	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)90CM HRC43SS(M)RCP
C2024353	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRC43SS(M)RCP
C2024361	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)30CM 2XDS19M.RCP
C2024401	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)90CM HR43S (M)RCP
C2024402	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR43S (M)RCP
C2024404	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HRN35(M)RCP
C2024406	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRN45 (M) RCP
C2024407	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)45CM DSMP13M.RCP
C2024409	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HRN40(M)RCP
C2024424	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM HR17(M).RCP
C2024433	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 90CM HR26 (M)RCP
C2024434	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM HR26 (M)RCP
C2024435	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M)RCP
C2024436	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M)RCP
C2024437	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR26M.RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C2024438	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR26(M).RCP
C2024439	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM HR30 (M)RCP
C2024440	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HR30 (M)RCP
C2024441	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)90CM 2XHR26(M).RCP
C2024443	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)90CM 2XHR17(M).RCP
C2024444	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR17M.RCP
C2024447	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37 (M)RCP
C2024448	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M) RCP
C2024450	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37S(M)RCP
C2024452	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37S(M)RCP
C2024453	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M) RCP
C2024458	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40 (M) RCP
C2024462	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)90CM HRB37S (M)RCP
C2024466	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HR40S(M)RCP
C2024467	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S(M)RCP
C2024468	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)RCP
C2024501	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM DR10(M).RCP
C2024505	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM2XHR13BM.RCP
C2024512	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DR12(M).RCP
C2024513	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM DR12 (M) .RCP
C2024514	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DR12(M).RCP
C2024515	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)70CM HR17B(M).RCP
C2024517	MONOPLUS VIOLET 0(3,5) 90CM HRC37S(M)RCP
C2024518	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRC37S (M)RCP
C2024519	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M)RCP
C2024520	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M)RCP
C2024521	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR17B(M).RCP
C2024522	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR22B(M)RCP
C2024523	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)70CM DR15 (M).RCP
C2024524	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DR15 (M).RCP
C2024525	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM DR15 (M).RCP
C2024527	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M)RCP
C2024528	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DR18(M).RCP
C2024529	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)40CM DR18 LOPM.RCP
C2024530	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22B(M)RCP
C2024531	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)75CM2XHR22BM.RCP
C2024532	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DR18(M).RCP
C2024533	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)70CM DR18 (M).RCP
C2024534	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DR18(M).RCP
C2024535	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DS16(M).RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C2024536	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS19(M)RCP
C2024537	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM DR22(M)RCP
C2024538	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM DS39 (M) RCP
C2024539	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DS16(M).RCP
C2024540	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM GS60(M).RCP
C2024541	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS24(M)RCP
C2024543	MONOPLUS VIOLET 0(3,5) 90CM HRC40S(M)RCP
C2024545	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)90CM HRC40SS(M)RCP
C2024546	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRC40SS(M)RCP
C2024547	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR26B(M)RCP
C2024548	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B(M)RCP
C2024551	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26B(M)RCP
C2024560	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 70CM HS40S (M).RCP
C2024570	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)20CM SKR26BM.RCP
C2024571	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM FR26(M).RCP
C2024572	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)20CM SKR26B(M).RCP
C2024573	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)20CMGR19B(M).RCP
C2024574	MONOPLUS VIOLET 3/0(2) 20CM GR19B(M).RCP
C2024589	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR48 (M)RCP
C2024598	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM DS30 (M)RCP
C2024601	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)90CM2XHRC26(M).RCP
C2024602	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XHR13M.RCP
C2024603	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XHR13(M).RCP
C2024605	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM2XHRC26(M).RCP
C2024606	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)40CM SKR26LOPM.RCP
C2024611	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DR18B(M).RCP
C2024613	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XHR17(M).RCP
C2024614	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR17M.RCP
C2024620	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)120CM 2XHR26M).RCP
C2024624	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR26M.RCP
C2024625	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR26(M).RCP
C2024626	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM 2XHR26(M).RCP
C2024630	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM 2XHS48(M).RCP
C2024634	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR22M.RCP
C2024635	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR22(M).RCP
C2024639	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR37(M).RCP
C2024644	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR37M.RCP
C2024646	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM 2XHR37(M).RCP
C2024649	MONOPLUS VIO 4/0(1,5)120CM SKR26(M).RCP
C2024650	MONOPLUS VIOLET4/0(1,5)40CMSKR26LOPM.RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C2024651	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)30CM SKR26M.RCP
C2024661	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)30CM SKR26 (M).RCP
C2024662	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)30CM SKR26 (M).RCP
C2024664	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)120CM SKR26(M).RCP
C2024679	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR20 (M)RCP
C2024680	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR20 (M)RCP
C2024714	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)45CM2XDR8(M).RCP
C2024721	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM2XDRC10M.RCP
C2024722	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM2XDRC10M.RCP
C2024730	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HS18(M).RCP
C2024732	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM2XDRC12M.RCP
C2024733	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDRC12M).RCP
C2024780	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)90CM 2XFR36(M).RCP
C2024801	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM2XDR10M).RCP
C2024802	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDR10M.RCP
C2024812	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDR12M.RCP
C2024813	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDR12(M).RCP
C2024814	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XDR12M.RCP
C2024818	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HRC37SS(M)RCP
C2024823	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDR15(M).RCP
C2024824	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XDR15M.RCP
C2024825	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XDR15(M).RCP
C2024833	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDR18(M).RCP
C2024834	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XDR18M.RCP
C2024835	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XFR26(M).RCP
C2024836	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM 2XFR26(M).RCP
C2024837	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)70CM 2XDR22(M).RCP
C2024843	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XHR10M.RCP
C2024846	MONOPLUS VIOL 6/0(0,7)70CM2XHR13FF(M).RCP
C2024847	MONOPLUS VIOL 5/0(1)70CM 2XHR13FF(M).RCP
C2024850	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)120CM PRC24(M).RCP
C2024861	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XGS60(M).RCP
C2024877	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRB48 (M) RCP
C2024881	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)90CM HRB48 (M) RCP
C2024889	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM HR17(M).RCP
C2024901	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)45CM DSMP19(M)RCP
C2024902	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)45CM HR13(M).RCP
C2024903	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 45CM HR13(M).RCP
C2024904	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM HR13(M).RCP
C2024906	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DS16(M).RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

C2024907	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP19M)RCP
C2024908	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP
C2024909	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)45CM DS19(M)RCP
C2024910	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP24(MRCP
C2024911	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)45CM DR12(M).RCP
C2024916	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)45CM DSMP13(M).RCP
C2024921	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)45CM HSMP15(M).RCP
C2024924	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)45CM HSMP9(M).RCP
C2024928	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM JRC30S(M).RCP
C2024936	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)90CM 2XFR26(M).RCP
C2024937	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)90CM 2XFR26(M).RCP
C2024945	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR30(M).RCP
C2024953	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HR26 LOP(M.RCP
C2024965	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)45CM DSMP19(M).RCP
C2024966	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)150CMHS40SMLOP.RCP
C2024968	MONOPLUS VIOL 2/0(3)150 HR30 LOOP(M).RCP
C2024970	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP16M.RCP
C2024976	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)45CM 2XDS39(M).RCP
C2024981	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)45CM DR10(M).RCP
C2024982	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)45CM 2XDR10M.RCP
C2024983	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DSMP24(MRCP
C2024984	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM 2XGR19M.RCP
C2024985	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)45CM 2XGR19(M).RCP
C2024986	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM DSMP24(M)RCP
C2024987	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM GS60(M).RCP
C2024988	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM DSMP24(M)RCP
C2024989	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M)RCP
C2024990	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M)RCP
C2024991	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM DS30 (M) RCP
C2024992	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M)RCP
C2024994	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM 2XGS45M.RCP
C2024995	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM 2XGS45M.RCP
G2024002	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM HR13(M).RCP
G2024003	MONOPLUS VIOLET 5/0(1) 70CM HR13(M).RCP
G2024004	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR13(M).RCP
G2024013	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M)RCP
G2024014	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR17 (M)RCP
G2024017	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26S(M)RCP
G2024018	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS26S(M)RCP
G2024019	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HS26S(M)RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

G2024021	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)120CM HS26S(M)RCP
G2024022	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)120CM HS37S(M)RCP
G2024023	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)120CM HS26S(M)RCP
G2024024	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR26 (M)RCP
G2024025	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)RCP
G2024026	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)RCP
G2024027	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M)RCP
G2024028	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)120CM HS26S(M)RCP
G2024031	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 120CM HS37S(M) RCP
G2024035	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)RCP
G2024036	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)RCP
G2024037	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M)RCP
G2024057	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37S(M)RCP
G2024058	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M) RCP
G2024078	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)RCP
G2024081	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 45CM DS19 (M)RCP
G2024087	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S(M)RCP
G2024088	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)RCP
G2024091	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR48 LOOPM.RCP
G2024101	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM DS24 (M)RCP
G2024102	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM DS19 (M)RCP
G2024105	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37 (M)RCP
G2024107	MONOPLUS VIOLET 1(4)240CM HR65 LOOPM.RCP
G2024109	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)45CM DSMP19(M)RCP
G2024114	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M)RCP
G2024115	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37S(M)RCP
G2024116	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M) RCP
G2024117	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS40 (M)RCP
G2024118	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS40 (M)RCP
G2024119	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) .RCP
G2024128	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS48 (M)RCP
G2024134	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR22 (M)RCP
G2024135	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)RCP
G2024157	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HS37S(M)RCP
G2024158	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) RCP
G2024168	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)70CM JRC30S(M).RCP
G2024175	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DS19 (M)RCP
G2024185	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HS26S (M)RCP
G2024186	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HS26S (M)RCP
G2024187	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HS26S (M)RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

G2024194	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)45CM DSMP16(M).RCP
G2024232	MONOPLUS VIOL 6/0(0,7)70CM DRC12(M).RCP
G2024233	MONOPLUS VIOLET 5/0(1) 70CM DRC12(M).RCP
G2024283	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CMHRC17(M).RCP
G2024284	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CMHRC17(M).RCP
G2024285	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CMHRC17(M).RCP
G2024286	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CMHRC17(M).RCP
G2024358	MONOPLUS VIOLET 1(4)150 HRN50 LOOPM).RCP
G2024393	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HRC48 LOPM.RCP
G2024409	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HRN40(M)RCP
G2024448	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M) RCP
G2024458	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40 (M) RCP
G2024467	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S(M)RCP
G2024468	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)RCP
G2024512	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DR12(M).RCP
G2024513	MONOPLUS VIOLET 5/0(1) 70CM DR12(M).RCP
G2024519	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M)RCP
G2024520	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M)RCP
G2024536	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS19(M)RCP
G2024567	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150CMHR40SLOPM.RCP
G2024568	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR40S LOPM.RCP
G2024625	MONOPLUS VIOL 3/0(2) 70CM 2XHR26(M).RCP
G2024721	MONOPLUS VIOL 7/0(0,5)70CM 2XDRC10(M).RCP
G2024722	MONOPLUS VIOL 6/0(0,7)70CM 2XDRC10(M).RCP
G2024801	MONOPLUS VIOL 7/0(0,5)70CM 2XDR10(M).RCP
G2024813	MONOPLUS VIOL 5/0(1) 70CM 2XDR12(M).RCP
G2024814	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)70CM 2XDR12(M).RCP
G2024908	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP
G2024916	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)45CM DSMP13(M).RCP
G2024990	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M)RCP
X2024002	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM HR13(M).RCP
X2024003	MONOPLUS VIOLET 5/0(1) 70CM HR13(M).RCP
X2024013	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M)RCP
X2024014	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR17 (M)RCP
X2024015	MONOPLUS VIOLET 3/0(2) 70CM HR17(M).RCP
X2024024	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR26 (M)RCP
X2024025	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)RCP
X2024026	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)RCP
X2024027	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M)RCP
X2024035	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

X2024036	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)RCP
X2024037	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M)RCP
X2024045	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M)RCP
X2024046	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M)RCP
X2024057	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HR37S (M)RCP
X2024058	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M) RCP
X2024067	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S(M)RCP
X2024068	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) RCP
X2024078	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)RCP
X2024079	MONOPLUS VIOLET 2(5) 90CM HR48 (M).RCP
X2024087	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S(M)RCP
X2024088	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)RCP
X2024090	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HR48 LOOPM.RCP
X2024091	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR48 LOOPM.RCP
X2024104	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37 (M)RCP
X2024109	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)45CM DSMP19(M)RCP
X2024112	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)45CM DSMP24(M)RCP
X2024128	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS48 (M)RCP
X2024134	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR22 (M)RCP
X2024135	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)RCP
X2024136	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M)RCP
X2024146	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HR22S (M)RCP
X2024185	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HS26S (M)RCP
X2024186	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HS26S (M)RCP
X2024187	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HS26S (M)RCP
X2024206	MONOPLUS VIOL 2/0(3) 70CM HR13SS(M).RCP
X2024207	MONOPLUS VIOL 0(3,5) 70CM HR13SS(M).RCP
X2024232	MONOPLUS VIOL 6/0(0,7)70CM DRC12(M).RCP
X2024283	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CMHRC17(M).RCP
X2024284	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CMHRC17(M).RCP
X2024285	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CMHRC17(M).RCP
X2024294	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HRC22(M)RCP
X2024295	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC22(M)RCP
X2024305	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC26(M)RCP
X2024306	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26(M)RCP
X2024347	MONOPLUS VIO 1(4)150CM HRC43SLOOP(M).RCP
X2024392	MONOPLUS VIOLET 1(4)200CM HRC48 LOPM.RCP
X2024393	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HRC48 LOPM.RCP
X2024437	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)90CM 2XHR26(M).RCP
X2024438	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR26(M).RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

X2024441	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)90CM 2XHR26(M).RCP
X2024458	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40 (M) RCP
X2024468	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)RCP
X2024469	MONOPLUS VIOLET 2(5) 90CM HR40S (M).RCP
X2024512	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DR12(M).RCP
X2024513	MONOPLUS VIOLET 5/0(1) 70CM DR12(M).RCP
X2024518	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRC37S (M)RCP
X2024534	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DR18(M).RCP
X2024535	MONOPLUS VIOLET 5/0(1) 70CM DS16(M).RCP
X2024536	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS19(M)RCP
X2024539	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DS16(M).RCP
X2024567	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150CMHR40SLOPM.RCP
X2024568	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR40S LOPM.RCP
X2024603	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XHR13(M).RCP
X2024605	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM2XHRC26(M).RCP
X2024613	MONOPLUS VIOL 5/0(1) 70CM 2XHR17(M).RCP
X2024614	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)70CM 2XHR17(M).RCP
X2024635	MONOPLUS VIOL 3/0(2) 70CM 2XHR22(M).RCP
X2024722	MONOPLUS VIOL 6/0(0,7)70CM 2XDRC10(M).RCP
X2024733	MONOPLUS VIOL 5/0(1) 70CM 2XDRC12(M).RCP
X2024801	MONOPLUS VIOL 7/0(0,5)70CM 2XDR10(M).RCP
X2024812	MONOPLUS VIOL 6/0(0,7)70CM 2XDR12(M).RCP
X2024835	MONOPLUS VIOL 3/0(2) 70CM 2XFR26(M).RCP
X2024836	MONOPLUS VIOL 2/0(3) 70CM 2XFR26(M).RCP
X2024896	MONOPLUS VIOL 2/0(3) 70CM 2XGR65(M).RCP
X2024897	MONOPLUS VIOL 0(3,5) 70CM 2XGR65(M).RCP
X2024907	MONOPLUS VIOLT 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)RCP
X2024908	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)45CM DSMP13(M).RCP
X2024916	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)45CM DSMP13(M).RCP
X2024970	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)45CM DSMP16(M).RCP
X2024984	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)45CM 2XGR19(M).RCP
X2024990	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M)RCP

INSTRUÇÕES DE USO**SUTURA SINTÉTICA ABSORVÍVEL**

Símbolos Utilizados nos Rótulos

Não reutilizar



Usar até ano + mês

Esterilizado a menos que a embalagem seja aberta ou danificada
Método de esterilização - ETO

Marca CE e nº de identificação do organismo notificado. Produto de acordo com os requisitos essenciais da Diretiva Médica nº 93/42/EEC



Número de lote



Ver instruções de utilização

REF

Catálogo número

FABRICADO POR:**B BRAUN SURGICAL S. A.**
Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubi – Barcelona
Espanha**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:****B|BRAUN**Laboratórios B|Braun S/A
Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09
São Gonçalo – RJ – Brasil
CEP: 24751-000
Farm. Resp.: Sônia M.Q. de Azevedo - CRF-RJ nº 4260
Registro ANVISA nº: 80136990467
CNPJ: 31.673.254/0001-02
SAC: 0800-0227286 (Serviço de Atendimento ao Cliente)