

Aesculap Spine ABC 2

Sistema de placa cervical anterior





Placa dinâmica com sistema auto-travante



AESCULAP®

Além de ser um sistema dinâmico e possuir um parafuso auto-travante o ABC 2 permite a fusão de níveis adjacentes através de sua exclusiva placa de extensão cranial / caudal " E-PLATE".

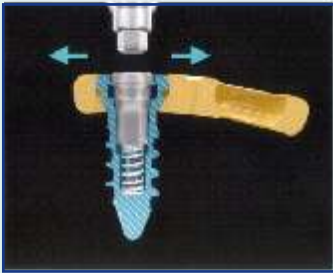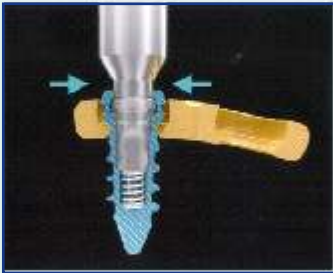

- Os parafusos são caracterizados por um mecanismo de travamento automático ativado por uma mola;
- Durante a inserção do parafuso, a chave empurra o pino para baixo destravando o sistema;
- Ao remover a chave o mecanismo da mola interna empurra o pino para cima travando automaticamente o sistema.



- As placas marcadas facilitam a escolha e o posicionamento;
- São pré moldadas.



- Proporcionam fusão em níveis adjacentes;
- Evita a remoção da placa anterior;
- Diminui o tempo cirúrgico;
- A extensão pode ser caudal ou cranial;

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09 - Arsenal
24751-000 - São Gonçalo - RJ - Brasil

S.A.C: 0800 227286

www.bbraun.com.br