

# Ficha Técnica - Intrafix® Safeset Flush

## Categoria do produto

Equipo Gravitacional

## Código de referência

4110000; 4110001; 4110020; 4110002

## Indicação de uso/Finalidade

Administração gravitacional de medicações endovenosas

## Principais características

O Intrafix® Safeset Flush foi desenvolvido para trazer uma maior solução à infusão gravitacional, sendo um sistema de infusão completo. Esse produto apresenta a linha principal com todas as características do conhecido Intrafix® Safeset, desenvolvido com duas tecnologias diferenciadas - AIRSTOP e PRIMESTOP. Estas tecnologias permitem um preenchimento em sistema fechado, e o impedimento da entrada de ar pelo filtro de gotejamento. A linha secundária - Intrafix® Primeline Flush - compõe o sistema, auxiliando na administração de medicamentos. O sistema possibilita a lavagem completa do equipo, eliminando o volume residual de medicamentos no sistema, que permanece fechado durante todo processo.

## Contraindicações

Não Aplicável

## Precauções

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade da embalagem.
- Para prevenir danos ao produto, siga as instruções de uso.
- Não reutilizável – seguir as orientações dos protocolos da CCIH.
- Verificar o prazo de validade antes do uso.


## Advertências

- Produto de uso único.
- Descartar imediatamente após o uso.
- Proibido reprocessar.

## Matéria-prima

### Equipos Intrafix Primeline e Safeset Flush – Matérias Primas:

ABS / MABS / PA / PC / PE / PP / PSU / PVC / PVP / SBC / SBS / SI / Copolímero de Acrílico em Suporte de Nylon

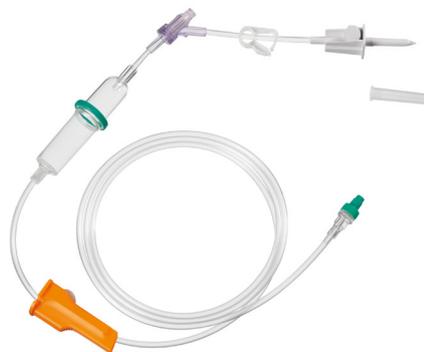

**Equipos Intrafix Primeline e Safeset Flush PVC-Free:** Matérias Primas: ABS / MABS / PA / PC / PE / PP / PSU / PUR / PVP / SBC / SBS / SI / Copolímero de Acrílico em Suporte de Nylon / Borossilicato

## Condições de transporte, armazenagem e manipulação

Os produtos devem ser armazenados em sua embalagem original, em temperatura ambiente, em local fresco e seco, ao abrigo de luz solar direta, poeira e umidade. Descartar se a embalagem estiver violada. Produto estéril. Usar técnicas assépticas.

## Apresentação comercial do produto:

Embalagem Primária: filme + papel grau cirúrgico

Embalagem Secundária: caixa com 25 ou 100 unidades

## Tempo máximo de utilização do produto:

96 horas

**Esterilização:** Óxido de etileno

**Validade:** 3 anos

NÃO CONTÉM LÁTEX | LIVRE DE DEHP

Farm. Responsável: Sônia M. Q. de Azevedo - CRF-RJ nº 4260

| Código  | Descrição   | Tam. (cm) | Unids p/caixa |
|---------|---|-----------|---------------|
| 4110000 | Equipo Intrafix® Safeset e Primeline Flush                                  | 180       | 25            |
| 4110001 | Equipo Intrafix® Safeset e Primeline Flush – Linha secundária               | 35        | 100           |
| 4110020 | Equipo Intrafix® Safeset e Primeline Flush Livres de PVC                    | 180       | 25            |
| 4110002 | Equipo Intrafix® Safeset e Primeline Flush Livres de PVC – Linha secundária | 35        | 100           |