

FICHA TÉCNICA – POLIFIX 2 (NEO)

EQUIPO PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS

CATEGORIA DO PRODUTO:

Extensor multivias

CÓDIGOS DE REFERÊNCIA:

409172

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:

Indicado para infusão simultânea de soluções parenterais em pediatria e neonatologia.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Conexão em duas vias para infusão simultânea de soluções parenterais com priming reduzido para uso em pediatria e neonatologia.
- Conectores luer fêmea, pinça corta fluxo (clamp em V) e intermediário luer.
- Livre de látex e DEHP.
- Volume: 0,3 mL
- Comprimento: 14 cm
- Classe I

CONTRAINDICAÇÕES:

Não aplicável

PRECAUÇÕES:


- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade da embalagem.
- Para prevenir danos ao produto, siga as instruções de uso e não use agulhas ou cânulas para acessar a válvula.
- Usar somente dispositivos de conexão padrão Luer.
- Não reutilizável – seguir as orientações dos protocolos da CCIH.
- Verificar o prazo de validade antes do uso.

ADVERTÊNCIAS:

- Produto de uso único.
- Descartar imediatamente após o uso.
- Proibido reprocessar.

COMPATIBILIDADE COM HEMODERIVADOS:

Sim

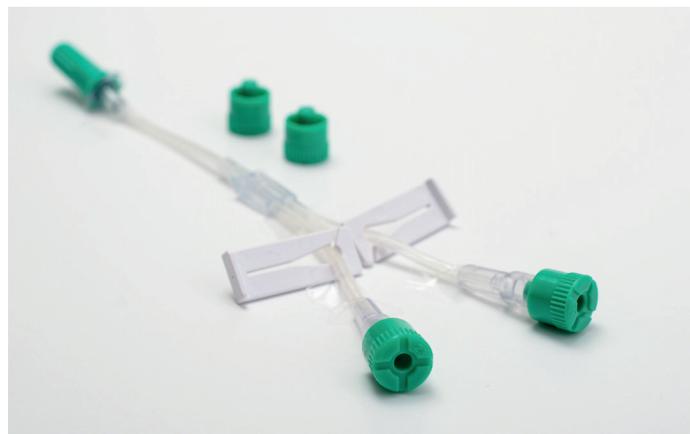

COMPATIBILIDADE COM DROGAS LIPÍDICAS:

Sim

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

Os produtos devem ser armazenados em sua embalagem original, em temperatura ambiente, em local fresco e seco, ao abrigo de luz solar direta, poeira e umidade. Descartar se a embalagem estiver violada. Produto estéril. Usar técnicas assépticas.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

Embalagem Primária: filme + papel grau cirúrgico

Embalagem Secundária: caixa de papelão contendo 120 unidades

TEMPO MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:

96 horas

ESTERILIZAÇÃO:

Óxido de etileno

VALIDADE:

3 anos

NÃO CONTÉM LÁTEX

LIVRE DE DEHP

Farm. Responsável: Sônia M. Q. de Azevedo – CRF-RJ nº 4260

B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

Registro ANVISA nº: 10008530425

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

